

УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ

Легкое удаление излишков

Раньше существовали сложности при адгезивной фиксации с использованием композитных цементов из-за трудностей, связанных с удалением излишков. Variolink Esthetic задает новый стандарт.

Продуманное сочетание фотоинициатора Ivocerin и фильтра, снижающего чувствительность к свету, позволяет клиницисту с легкостью удалять излишки после предварительной полимеризации. Ivocerin обеспечивает быструю и надежную полимеризацию материала при окончательном засвечивании материала.




Пластичная консистенция

Текущесть материала оптимально сочетается с его стабильностью, благодаря регулятору вязкости. Цемент легко выдавливается из шприца. Материал равномерно заполняет цементный зазор, но остается стабильным в области цементного соединения и легко удаляется.

Впечатляющая рентгеноконтрастность


Variolink Esthetic в плане рентгеноконтрастности продолжает традиции, заложенные своим предшественником - Variolink II. Высокая рентгеноконтрастность материала позволяет легко обнаружить излишки цемента или вторичный кариес.

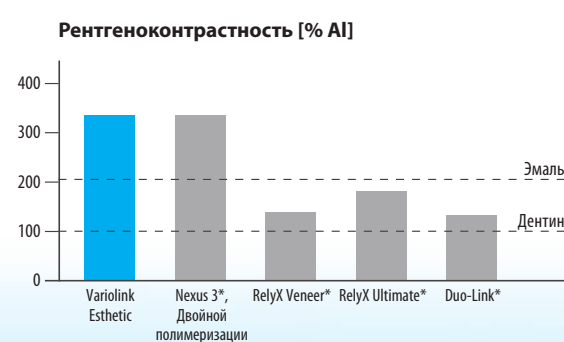

* эти марки не являются зарегистрированными торговыми знаками фирмы Ivoclar Vivadent AG. Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шань, 2014 (измерено в соответствии с нормой ISO 4049).

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Variolink® Esthetic - это продукт из категории «Несъемное протезирование». Продукты из этой категории обеспечивают весь процесс изготовления несъемных протезов: начиная с временной конструкции и заканчивая средствами ухода за реставрациями. Продукты оптимально согласованы между собой и могут успешно применяться на практике.

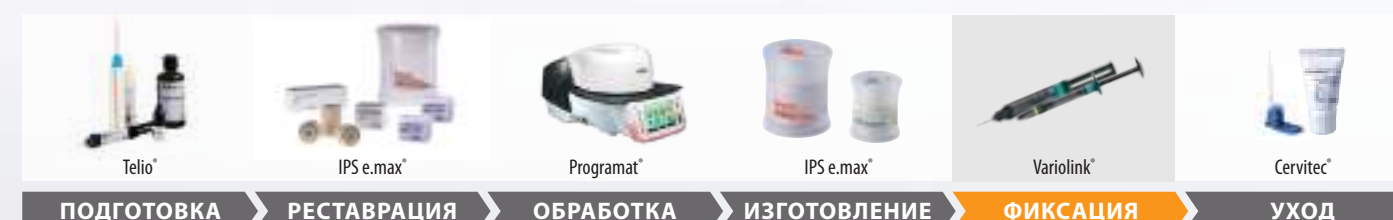

К ПРОДУКТАМ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:

Система IPS e.max®

all ceramic – all you need



Комплексное решение для всех показаний

- Высокопрочные и эстетичные материалы для технологий прессования и CAD/CAM
- Уникальный дисиликат лития (LS) и оксид циркония (ZrO₂);
- От тонких виниров до мостовидных протезов большой протяженности
- Разные варианты фиксации: адгезивно, самоадгезивно и традиционно

Fluor Protector S

Фторсодержащий защитный лак



Гомогенный защитный лак в дозированной тубе

- Немедленное фторирование эмали
- Обильное фторирование
- Мягкий вкус

Вы хотите больше знать о продуктах из категории «Несъемное протезирование»?
Обратитесь к своему представителю Ivoclar Vivadent или получите информацию на нашем сайте:
www.ivoclarvivadent.com

Производство и сбыт:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Шань
Лихтенштейн
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Сбыт в Германии:
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ivoclar vivadent
passion vision innovation

НОВИНКА!

Variolink Esthetic

Эстетический композитный цемент

Удивительно простая эстетика!

Идеально для IPS e.max®



ivoclar vivadent
passion vision innovation

Variolink Esthetic

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

Variolink Esthetic – это эстетический фиксирующий композит светового и двойного отверждения для постоянной фиксации керамических и композитных реставраций. Его концепция базируется на эстетических фиксирующих композитах Variolink II и Variolink Veneer, которые уже давно зарекомендовали себя в клинической практике.



Цветовая концепция

Чтобы цвет реставрации точно соответствовал цвету соседних зубов, компания Ivoclar Vivadent разработала новую сбалансированную и лаконичную цветовую концепцию. Цвет «нейтральный» обеспечивает благодаря своей прозрачности нейтральную в цветовом отношении фиксацию реставрации. Цвета «светлый» и «светлый +» позволяют ступенчато осветлять реставрацию; цвета «теплый» и «теплый+» ступенчато затемняют фиксирующуюся на них керамическую или композитную реставрацию. Цвета были названы так в соответствии с их цветовым воздействием. Это облегчает выбор фиксирующего материала, подходящего к конкретной клинической ситуации.



Превосходная стабильность цвета



Variolink Esthetic обладает невероятно стабильным цветом. Это стало возможным благодаря запатентованному фотоинициатору Ivocerin®, который абсолютно не содержит аминовых соинициаторов. Variolink Esthetic создает основу для долгосрочных убедительных эстетических результатов. При интенсивном освещении и во влажной среде цвет Variolink Esthetic не изменяется.

Еще одним компонентом выдающейся эстетики Variolink Esthetic является натуральная флюорисценция как у естественных зубов. К тому же, этот композитный цемент отличается высокой износоустойчивостью, что обеспечивает идеальное краевое прилегание реставрации.



Variolink Esthetic
Испытание на устойчивость к солнечным лучам (в соответствии с нормами ISO4049).
Левая половина засвечена



Variolink Esthetic Образец для сравнения
После нахождения в воде

ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО УСПЕХА



Оптимальная адгезия

Tetric N-Bond Universal содержит в своем составе гидрофильные и гидрофобные компоненты. Особые гидрофильные компоненты оптимизируют увлажненность дентина.

Поэтому сила сцепления с дентином остается неизменной даже при предварительном протравливании фосфорной кислотой и на пересушенной поверхности дентина

Как результат, Tetric N-Bond Universal достигает высоких значений силы адгезии как на влажном, так и на сухом дентине.




Идеальное решение для реставраций из стеклокерамики

Наилучшие показатели силы адгезии при использовании Variolink Esthetic достигаются при фиксации реставраций из стеклокерамики, например, IPS e.max® CAD/Press или IPS Empress® CAD/Esthetic, в сочетании с Monobond Etch & Prime® – первым в мире самопротравливающим праймером для стеклокерамики. Этот однокомпонентный керамический праймер осуществляет протравливание и силанизацию поверхности стеклокерамики за один простой шаг. Столь нелюбимое протравливание поверхности реставрации с использованием плавиковой кислоты более не требуется.



Прочность на отрыв на стеклокерамике из дисиликата лития IPS e.max® CAD первоначально и после старения

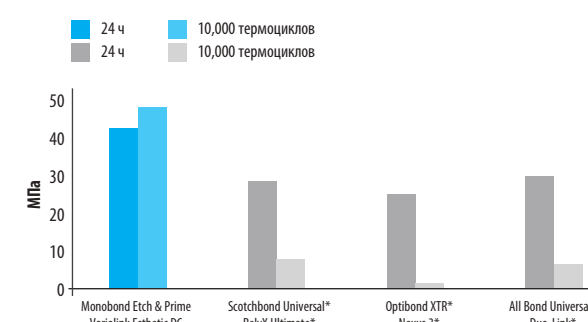

* эти марки не являются зарегистрированными торговыми знаками фирмы Ivoclar Vivadent AG.
Источник: F&E Ivoclar Vivadent AG, Шан, 2014

ФОРМЫ ПОСТАВКИ



Variolink Esthetic LC System Kit (только светового отверждения)
3 Шприца Variolink Esthetic LC, 2 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
3 Шприца Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
1 Шприц Total Etch, 2 г
1 Adhese Universal VivaPen, 2 мл, или 1 Бутылочка, 5 г
1 Бутылочка Monobond Plus, 5 г
1 Шприц Liquid Strip, 2,5 г
Различные принадлежности
666433WW с Adhese Universal VivaPen, 2 мл
666065WW с Adhese Universal в бутылочке, 5 г

Variolink Esthetic DC System Kit (двойного отверждения)
3 автоматикс-шприца Variolink Esthetic DC, 5 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
3 Шприца Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
1 Шприц Total Etch, 2 г
1 Adhese Universal VivaPen, 2 мл, или 1 Бутылочка, 5 г
1 Бутылочка Monobond Plus, 5 г
1 Шприц Liquid Strip, 2,5 г
Различные принадлежности
666434WW с Adhese Universal VivaPen, 2 мл
666125WW с Adhese Universal в бутылочке, 5 г

Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max max (только светового отверждения)
3 Шприца Variolink Esthetic LC, 2 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
3 Шприца Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
1 Шприц Total Etch, 2 г
1 Adhese Universal VivaPen, 2 мл
1 Бутылочка Monobond Etch & Prime, 5 г
1 Шприц Liquid Strip, 2,5 г
Различные принадлежности
681493WW

Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max (двойного отверждения)
3 автоматикс-шприца Variolink Esthetic DC, 5 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
3 Шприца Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 г (light (светлый), neutral (нейтральный), warm (теплый))
1 Шприц Total Etch, 2 г
1 Adhese Universal VivaPen, 2 мл
1 Бутылочка Monobond Etch & Prime, 5 г
1 Шприц Liquid Strip, 2,5 г
Различные принадлежности
681492WW

Variolink Esthetic LC Refill (только светового отверждения)
1 Шприц, 2 г (выбранного цвета)
5 канюль для нанесения
666126WW Light+ (светлый +)
666127WW Light (светлый)
666128WW Neutral (нейтральный)
666129WW Warm (теплый)
666130WW Warm+ (теплый +)

Variolink Esthetic DC Refill Refill (двойного отверждения)
1 автоматикс-шприц, 5 г (выбранного цвета)
10 канюль для смешивания
666117WW Light+ (светлый +)
666118WW Light (светлый)
666119WW Neutral (нейтральный)
666120WW Warm (теплый)
666121WW Warm+ (теплый +)

Variolink Esthetic DC Refill (двойного отверждения)
1 Автомиксшприц, 9 г (выбранного цвета)
15 Mischkanülen
666122WW Light (светлый)
666123WW Neutral (нейтральный)
666124WW Warm (теплый)

Variolink Esthetic Try-In Paste Refill
1 Шприц, 1,7 г (выбранного цвета)
5 канюль для нанесения
666067WW Light+ (светлый +)
666113WW Light (светлый)
666114WW Neutral (нейтральный)
666115WW Warm (теплый)
666116WW Warm+ (теплый +)

Принадлежности
645951 Смешивающие типсы, короткие, острое, Refill, 15 штук
559224 Канюли для нанесения Variolink, Refill, 20 штук



Выход из лабиринта фиксации

ДСистема Cementation Navigation System, уже полюбившееся многим мультимедиа приложение от Ivoclar Vivadent, предлагает стоматологам в очень практичной форме помощь в принятии решения при различных случаях фиксации.

www.cementation-navigation.com