



Прямая реставрация

Tetric® N-Collection составляет часть категории продуктов «Прямая реставрация». Продукты этой категории предназначены для прямой реставрации зубов - от препарирования до ухода за полостью рта после реставрации. Продукты оптимально скоординированы друг с другом и позволяют успешно проводить подготовку и нанесение.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ:

OptraGate®

Безлатексный ретрактор губ и щек



Простое решение для лучшего обзора

- Значительно увеличен доступ к рабочему полю
- Пациент чувствует себя более комфортно благодаря трехмерной гибкости
- Широкий диапазон показаний

Fluor Protector N

Защитный фторсодержащий лак



Отличная профилактика кариеса и эрозии

- Эффективный — мгновенное фторирование эмали
- Оперативный - готов к немедленному использованию
- Высокопродуктивный - экономный расход

Вы хотите больше узнать о продуктах категории «Прямая реставрация»? Это просто. Свяжитесь с Вашим представителем Ivoclar Vivadent или посетите сайт www.ivoclarvivadent.com.

ООО «Ивоклар Вивадент»
Россия, Москва, 115432 Проспект
Андропова 18, корп. 6, офис 10-06
Тел.: +7 (499) 418-03-00
Факс: +7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Tetric® N-Collection

Полная нано-оптимизированная реставрационная система



Откройте для себя нашу
новейшую **КОЛЛЕКЦИЮ**

Tetric® N-Collection

Tetric® N-Ceram | Tetric® N-Ceram Bulk Fill | Tetric® N-Flow | N-Etch | Tetric® N-Bond | Tetric® N-Bond Self-Etch

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Коллекция идеально скоординированных продуктов

Композитные пломбировочные материалы, подходящие практически для любых случаев прямых реставраций. Адгезивы, которые легко использовать, обеспечивающие превосходную прочность сцепления. Вот что выгодно отличает nano-оптимизированные продукты линейки Tetric® N-Collection. Эти материалы демонстрируют отличные клинические характеристики при реставрации зубов, начиная с 2007 года. Независимо от того, восстанавливаются ли передние или боковые зубы, в линии прекрасно скоординированных друг с другом продуктов, Tetric N-Collection, есть решение для полостей любого размера.

Пользователи не просто получают преимущества от использования продукции, которая проверена годами клинического применения. Они обретают новейшую технологию и больше возможностей для маневра в своей повседневной практике.



Tetric® N-Ceram Bulk Fill

4 ММ ДЛЯ УСПЕХА

Ранее приходилось поэтапно накладывать несколько 2-мм слоев до тех пор, пока полость не будет заполнена. Это довольно трудоемкая работа. Новый композит для реставрации зубов боковой группы Tetric N-Ceram Bulk Fill обеспечивает более быстрое заполнение полостей слоями толщиной до 4 мм. Однородная консистенция в значительной мере облегчает задачу придания материалу нужной формы.

Хорошо продуманная концепция


Благодаря запатентованному фотоинициатору Ivocerin® даже слой более 4 мм может полимеризоваться за 10 секунд (при 1000 мВт/см²). Ivocerin - усилитель полимеризации, включенный в стандартную фотоиницирующую систему Tetric N-Ceram Bulk Fill.

По сравнению с камфорохиномом и оксидом ацилфосфина (например, Lucirin TPO), химически он гораздо более активен при воздействии фотополимеризационной лампы.



ОБЫЧНОЕ ПОСЛОЙНОЕ ВНЕСЕНИЕ ДВУХМИЛЛИМЕТРОВОГО СЛОЯ
ВНЕСЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМИЛЛИМЕТРОВОГО СЛОЯ TETRIC N-CERAM BULK FILL

Несмотря на короткое время полимеризации, допускает продолжительность работы с Tetric N-Ceram Bulk Fill до 200 секунд. Такое полезное качество обеспечивает входящий в состав фильтр светочувствительности. Это позволяет выполнять эстетическую обработку без спешки. Особый компонент для снижения усадочного напряжения минимизирует усадку в процессе полимеризации. Он действует, как пружина, подавляя напряжение, вызванное усадкой.

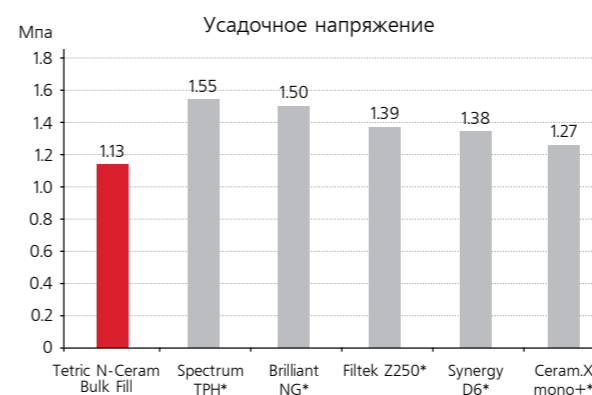

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012
*Не являются официально зарегистрированными торговыми марками Ivoclar Vivadent AG



Др. Эдуардо Ман, Сантьяго, Чили

Tetric® N-Ceram

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Tetric N-Ceram – композитный материал светового отверждения для прямых реставрационных процедур во фронтальном и жевательных отделах. Благодаря применению нано-оптимизированной технологии Tetric N-Ceram не сваливается, что делает материал удобным для моделирования. Входящий в состав фильтр светочувствительности гарантирует возможность достаточно длительной обработки, несмотря на короткое время полимеризации - всего 10 секунд (≥ 1000 мВт/см²). Еще одно преимущество Tetric N-Ceram - материал не прилипает к инструментам.

Совместимость с натуральными оттенками


Нано-цветовые пигменты способствуют оптимальной адаптации цвета материала к цвету живых зубов. Они тонко распределены в структуре композитного материала и обеспечивают встраивание реставрации в окружающие ее структуры зуба. В результате, становится возможным создание реставраций, удовлетворяющих постоянно растущим эстетическим требованиям.

Превосходная рентгеноконтрастность

Хорошая рентгеноконтрастность материала – необходимое условие точной диагностики вторичного кариеса. Высокую рентгеноконтрастность Tetric N-Ceram ($> 400\%$ Al) обеспечивает добавление фторида иттербия. Что позволяет отличить реставрационный материал от структуры настоящего зуба и делает возможным долгосрочный успех лечения.



Др. Э. Ман, Чили, 2011 г.

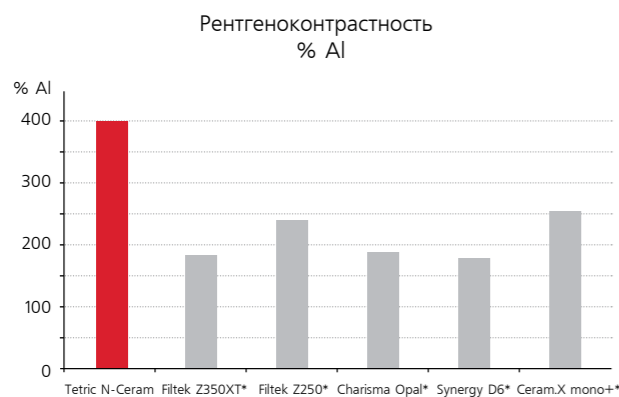

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

*Не являются официально зарегистрированными торговыми марками Ivoclar Vivadent AG

Tetric® N-Flow

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКОТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ

Текучие композиты это материалы, без которых невозможно представить себе современную терапевтическую стоматологию. Они применяются, когда необходимо достичь структурного сходства поверхностей. В этом случае Tetric N-Flow может оказаться очень полезным.

Оптимальная вязкость Tetric N-Flow в сочетании с превосходными характеристиками текучести делает продукт подходящим для применения в качестве прокладочного материала. Кроме того, он может применяться в реставрациях класса V - благодаря стабильной консистенции, не позволяющей материалу растекаться. Это качество обеспечивает регулятор вязкости. Он же отвечает за вязкость композита во время сжатия.



Прокладочный слой в сочетании с композитным материалом нормальной вязкости, таким как Tetric N-Ceram/Tetric N-Ceram Bulk Fill в реставрациях I - V классов



Расширенное запечатывание фиссур



Небольшие пломбы любых видов (классы III и V)

Tetric N-Flow идеально совместим с другими светоотверждаемыми реставрационными композитными материалами, например, с Tetric N-Ceram и Tetric N-Ceram Bulk Fill. Великолепная увлажняющая способность обеспечивает удобство применения материала во всех областях полости.



Др. А. Пешке, Шаан, 2012 г.

Tetric® N-Bond Tetric® N-Bond Self-Etch

ВСЕГДА НАДЕЖНАЯ АДГЕЗИЯ

Независимо от используемой техники: тотального травления или самопротравливания, светоотверждаемые однокомпонентные адгезивы Tetric N-Collection устанавливают прочную связь между твердыми тканями зуба и реставрацией. Не содержащая ацетона формула продуктов предотвращает преждевременное испарение раствора в процессе внесения адгезива. Благодаря длительной стабильности консистенции обеспечивается надежное проникновение в ткань зуба. Кроме того, блестящий слой, который формируется на поверхности в процессе нанесения, делает возможной точную визуальную оценку.



Др. А. Баез, Чили, 2011 г.




Др. С. Хернандес, Мексика, 2011 г.

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:

- Экономия времени: один шаг - один слой
- Устанавливает стабильную связь между эмалью и дентином
- Неизменно высокое качество и прочная связь

Убедительная сила адгезии

Самая большая область подготовленной поверхности зуба обычно состоит из дентина. Поэтому высокие показатели сцепления являются синонимом полноценной адгезии. В то же время хорошая адгезия эмали обязательна для достижения надежного краевого прилегания

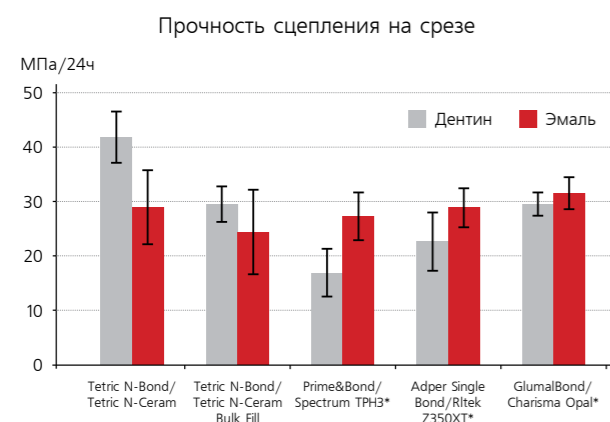

R&D Ivodan/Vivadent AG, Schaan, 2012
*Не являются официально зарегистрированными торговыми марками Ivoclar Vivadent AG

Tetric® N-Collection

ПОЛНАЯ НАНО-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Tetric N-Ceram Bulk Fill

Refill в шприцах 1 x 3,5 г.
Refill в шприцах 2 x 3,5 г.
Refill в кавифилах 10 x 0,25 г.

Доступны в следующих цветах:
IVA- цвет Universal A
IVB – цвет Universal B
IVW - белый оттенок для молочных зубов или светлых постоянных зубов

Набор System Kit с Tetric N-Bond

4 x 3,5 г. Tetric N-Ceram Bulk Fill (2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW)
1 x 6 г. Tetric N-Bond
1 x 2 г. N-Etch
1 расцветка
Различные аксессуары

Набор System Kit с Tetric N-Bond Self-Etch

4 x 3,5 г. Tetric N-Ceram Bulk Fill (2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW)
1 x 6 г. Tetric N-Bond Self-Etch
1 расцветка
Различные аксессуары

Tetric N-Ceram

Refill в шприцах
1 x 3,5 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Refill в кавифилах

10 x 0,25 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Набор Intro Pack с Tetric N-Bond

4 x 3,5 г. в шприцах
1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2
1 x 6 г. Tetric N-Bond
1 x 2 г. N-Etch
1 расцветка
Различные аксессуары

Набор Intro Pack с Tetric N-Bond Self-Etch

4 x 3,5 г. в шприцах
1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2
1 x 6 г. Tetric N-Bond Self-Etch
1 расцветка
Различные аксессуары

Tetric N-Flow

Refill в шприцах
1 x 2 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I

Refill в кавифилах

10 x 0,25 г. доступны в следующих цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I

Assortment Pack

8 x 2 г. в шприцах
1 x A1, 4 x A2, 2 x A3, 1 x A3.5
1 расцветка
Различные аксессуары

Аксессуары

20 x аппликационных насадок

N-Etch

Refill
2 x 2 г. N-Etch в шприцах
10 x аппликационных насадок

Аксессуары

20 x аппликационных насадок

Tetric N-Bond Self-Etch

Refill бутылочка

1 x 6 г. бутылочка

Refill VivaPen

1 x 2 мл. ручка VivaPen
20 x кисточек-канюль VivaPen

Аксессуары

50 x белых аппликаторов Vivadent
100 x кисточек-канюль VivaPen
500 x рукавов VivaPen

Tetric N-Bond

Refill бутылочка

1 x 6 г. бутылочка

Refill VivaPen

1 x 2 мл ручка VivaPen
20 x кисточек-канюль VivaPen

Аксессуары

50 x белых аппликаторов Vivadent
100 x кисточек-канюль VivaPen
500 x рукавов VivaPen

